

MG Withings - version 2.1.43 du 10/10/2026

Matériel requis : Balance Withings et compte Withings

Écosystème MG Domo : présentation, installation et liste des plugins dans [MG_Domo.pdf](#)

MG Withings

Présentation

MG Withings connecte votre compte **Withings** (balances connectées, ex-Nokia) à Jeedom et y rapatrie automatiquement vos **données de santé** : pesées, composition corporelle, fréquence cardiaque, vitesse d'onde de pouls et âge vasculaire. Les valeurs sont **historisées** pour produire des graphiques sur la durée.

Deux idées à retenir :

- **Un équipement par personne (« utilisateur »)**. Chaque compte Withings autorisé devient un équipement qui porte toutes les mesures de cette personne. Les **balances** elles-mêmes apparaissent comme des équipements distincts (modèle, identifiant, niveau de batterie).
- **La liaison se fait par autorisation (OAuth)**. Vous créez une application sur le site Withings, puis vous autorisez chaque compte ; ensuite tout est automatique.

Prérequis :

- mgWithings est **autonome** : il ne nécessite **pas** le plugin mgDomo.
- Pour l'autorisation et les mises à jour en temps réel, Jeedom doit être **accessible depuis l'extérieur** (accès distant configuré).

Sommaire

- [1. Créer l'application Withings](#)
- [2. Lier vos comptes utilisateurs](#)
- [3. Visualiser vos courbes](#)
- [4. Vérifier l'état des liaisons](#)
- [5. Les mesures suivies](#)
- [6. La synchronisation](#)
- [7. Points d'attention](#)
- [8. Questions fréquentes](#)

1. Créer l'application Withings

La liaison repose sur une application déclarée chez Withings. Cela se fait une seule fois, dans la configuration du plugin.

Configuration globale : l'application Withings (OAuth)

Création de l'application Jeedom sur le site Withings / Nokia

1 Créer Application

2 URL de retour https://plugins/mgWithings/core/php/callback.php

3 Client ID Secret key

1 Créer Application : ouvre le site Withings pour créer l'application et obtenir les identifiants

2 URL de retour (redirect_uri) : a déclarer cote Withings (le domaine est masque ici)

3 Client ID et Secret key : a recopier depuis le site Withings (masques ici)

1. Cliquez sur **Créer l'application** : le site Withings s'ouvre pour créer l'application et obtenir les identifiants.
2. Reportez chez Withings l'**URL de retour** (redirect_uri) affichée, de la forme `https://<votre-acces-externe>/plugins/mgWithings/core/php/callback.php`.
3. Recopiez le **Client ID** et la clé secrète fournis par Withings dans les champs **Client ID** et **Secret**, puis sauvegardez.

2. Lier vos comptes utilisateurs

Pour chaque personne, ajoutez un équipement « utilisateur » puis liez-le à son compte Withings.

Configurer un utilisateur et le lier a Withings

1 Paramètres généraux

Nom de l'utilisateur Balance MG

Objet parent Maison

Options ☒ Activer ☒ Visible

Catégorie ☐ Chauffage ☐ Sécurité ☐ Énergie ☐ Lumière ☐ Ouvrant ☐ Automatisation ☐ Multimédia ☒ Autre

Liaison Withings

2 Lien utilisateur OK

3 Mode push ☒ Actif ☐ Désactiver

1 Le mode push nécessite que Jeedom soit accessible de l'extérieur et que la partie réseau soit bien configurée.

1 Paramètres généraux : nom de l'utilisateur, objet parent, options

2 Lier a un utilisateur : lance l'autorisation OAuth Withings (vert = compte lie)

3 Mode push : mises à jour en temps reel envoyees par Withings (neessite un acces externe a Jeedom)

- **Paramètres généraux** : nom de l'utilisateur, objet parent, options (Activer / Visible).
- **Catégorie** (groupe **Général**) : facultative ; elle sert à filtrer les widgets et détermine la couleur de leur barre de titre. **Etat du widget** : **Activer** décoché, l'équipement n'est ni utilisable dans Jeedom ni visible sur le dashboard ; **Visible** décoché, il reste utilisable mais n'apparaît pas sur le dashboard.
- **Commentaires** : zone de texte libre, à droite du groupe **Général**, pour vos notes sur cet équipement.
- **Lier à un utilisateur** : lance l'autorisation Withings (page de consentement). Une fois lié, le bouton passe au **vert**. Le renouvellement de l'autorisation est ensuite automatique.
- **Mode push** : active les mises à jour **en temps réel** envoyées par Withings dès qu'une nouvelle pesée arrive (sans attendre la synchronisation périodique). Il nécessite que Jeedom soit accessible depuis l'extérieur.

Ces deux réglages forment le groupe **Liaison Withings**, présent seulement sur la fiche d'un utilisateur (pas sur celle d'une balance) :

- le bouton de liaison affiche **Lien utilisateur OK** en vert quand le compte est relié, **Lien rompu : cliquez pour relier** en rouge quand l'autorisation est à refaire ;


- à côté de **Mode push**, une pastille indique **Actif** ou **Inactif**. Le bouton **Activer** n'apparaît que lorsque le mode push est inactif, **Désactiver** que lorsqu'il est actif ; désactivé, les mesures n'arrivent plus qu'aux relevés périodiques. Si l'opération échoue, vérifiez d'abord le lien de l'utilisateur avec Withings.

3. Visualiser vos courbes

Le plugin propose un **panneau** qui trace l'évolution de chaque mesure dans le temps.

- Plage de dates** : choisissez la période à afficher (par défaut, les 3 dernières années).
- Boutons de période rapides** : **S** (semaine), **M** (mois), **3M**, **6M**, **A** (an), **3A**, **Tous**.
- Agrégation** : affichez les valeurs brutes, ou regroupées en moyenne / somme / minimum / maximum par heure, jour, semaine, mois ou année.
- Graphiques** : choisissez les courbes à afficher (ce choix est mémorisé par votre navigateur).


Le panneau Sante : choisir la periode et l'agregation

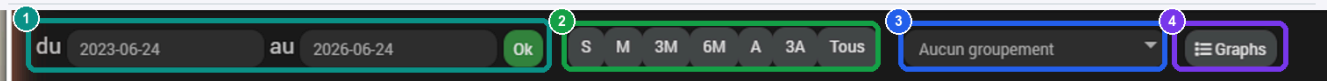

- 1 Plage de dates à afficher (par défaut les 3 dernières années)
- 2 Boutons de periode rapides : S / M / 3M / 6M / A / 3A / Tous
- 3 Agregation : aucune, ou moyenne / somme / min / max par heure, jour, semaine, mois, année
- 4 Graphs : choisir les courbes à afficher (memorise par navigateur)

Chaque mesure a son **graphe** ; chaque utilisateur y apparaît comme une **courbe** distincte, avec sa propre échelle.

Un graphe par mesure : l'exemple du poids

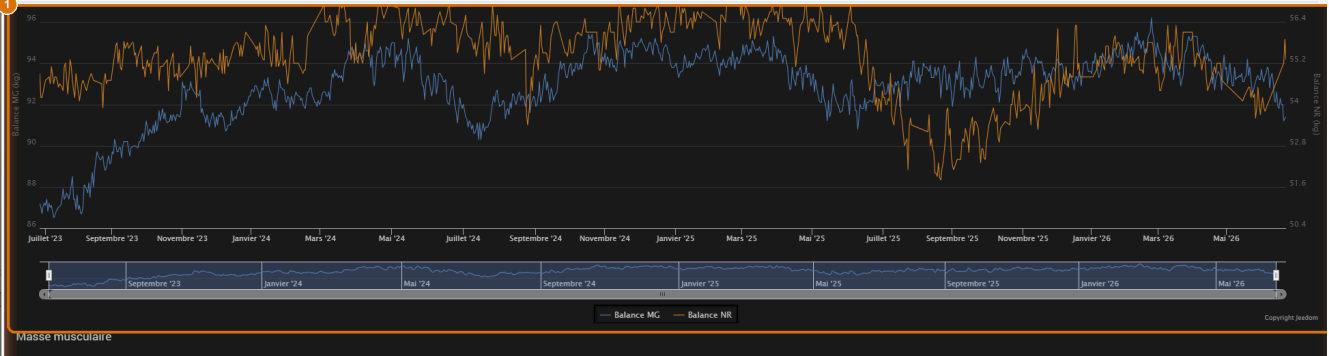

- 1 Chaque mesure a son graphe ; chaque balance / personne y apparait comme une courbe distincte

Détail des contrôles du panneau :

- du / au** puis **OK** : affiche la période saisie, en journées entières (du premier jour à 0 h au dernier jour à minuit). Une très grande plage peut être longue à calculer, voire ne pas s'afficher.
- S, M, 3M, 6M, A, 3A** : la dernière semaine, le dernier mois, les 3 ou 6 derniers mois, la dernière année ou les 3 dernières années jusqu'à aujourd'hui ; **Tous** remonte au 1er janvier 2010. Le bouton choisi reste en surbrillance et les dates **du / au** sont mises à jour.

- Menu de groupement : **Aucun groupement** affiche chaque mesure telle qu'enregistrée ; les autres choix (**Somme, Moyenne, Minimum ou Maximum, par heure, par jour, par semaine, par mois ou par année**) remplacent les mesures par une seule valeur par période. Le choix est appliqué aussitôt et mémorisé par votre navigateur.
- **Graphiques** : ouvre ou ferme le cadre **Graphiques à afficher**, une case par mesure. Seules les mesures **historisées** y figurent. Tant que vous n'avez rien changé, les cases suivent la case **Afficher** de chaque commande ; ensuite votre choix est mémorisé par le navigateur, indépendamment de cette case. Tout décocher revient à suivre la case **Afficher**.

Une mesure sans aucune valeur sur la période n'a pas de graphe. Dans un graphe, chaque utilisateur a sa propre échelle verticale ; faites glisser la souris sur le graphe ou utilisez la barre de navigation sous la courbe pour zoomer sur une partie de la période.

Astuce : une plage de dates très large peut être longue à calculer ; commencez par une période courte si l'affichage tarde.

4. Vérifier l'état des liaisons

Le bouton **Santé** (sur la page du plugin) ouvre un tableau récapitulatif : une ligne par équipement, utilisateur ou balance.

La page Sante : etat de chaque balance

Module	ID	Lien avec mgWithings	Push	Dernière communication	Date création
Maison Balance MG	1800	OK	OK	2025-05-24 08:23:08	2020-08-22 17:09:36
Maison Balance NR	1802	OK	OK	2025-05-24 09:09:54	
Maison Balance Withing	27749	OK		2025-05-24 18:30:07	2025-05-28 10:46:10

① Pour chaque balance : etat du lien Withings et du mode push (OK = operationnel)
 ② Date de la dernière communication et date de creation de l'equipement

Chaque ligne indique l'**ID** de l'équipement, l'état du **lien avec Withings**, l'état du **mode push**, la date de la **dernière communication** et la **date de création**. Le lien et le mode push n'ont de sens que sur les lignes **utilisateur** : une balance affiche toujours un lien **OK** et un mode push vide. C'est l'endroit à consulter en premier si une pesée ne remonte plus.

5. Les mesures suivies

Le plugin remonte et historise les mesures suivantes :

Mesure	Unité
Poids	kg
Masse maigre	kg
Masse grasse	% et kg

Mesure	Unité
Masse musculaire	kg
Hydratation	kg
Masse osseuse	kg
Fréquence cardiaque	bpm
Vitesse onde de pouls (PWV)	m/s
Âge vasculaire	ans

Le sommeil et l'activité (pas, calories) ne sont pas suivis par le plugin.

Chaque mesure devient une **commande d'information** historisée (donc traçable en courbe). Trois **actions** sont aussi disponibles sur l'équipement utilisateur : **Rafraîchir**, **Importer historique complet** et **Importer 7 derniers jours**. L'import complet récupère tout l'historique du compte (une valeur par jour) sans jamais effacer l'existant.

L'onglet Commandes

L'onglet **Commandes** de chaque équipement liste ses commandes dans un tableau : **ID**, **Nom**, **Type**, **Options**, **Etat**, **Actions**. Au-delà de 30 commandes, un champ **Rechercher une commande** permet de filtrer la liste.

- **Nom** : modifiable, le plugin ne le réécrit pas ; le bouton à côté permet de **choisir une icône**. Dessous, en grisé, l'identifiant de la mesure Withings, géré par le plugin et non modifiable.
- **Options** : **Afficher**, **Historiser**, **Inverser**, ainsi que **Min** et **Max** (valeurs minimale et maximale de la commande) et **Unité** (affichée après la valeur).
- **Afficher** décoché : la mesure n'est plus cochée d'office dans le panneau des graphiques (tant que vous n'y avez pas fait votre propre choix).
- **Historiser** décoché : la mesure n'est plus conservée dans le temps et disparaît du panneau des graphiques.
- **Etat** : la valeur actuelle de la commande.
- **Actions** : **Configurer** ouvre la configuration avancée de la commande, **Tester** l'exécute.

Les commandes étant créées par le plugin, aucun bouton ne permet d'en supprimer une depuis ce tableau.

6. La synchronisation

Les données sont rafraîchies par trois mécanismes complémentaires :

- **Toutes les 30 minutes** : récupération des mesures des 7 derniers jours. C'est le rythme de fond, qui maintient aussi l'autorisation Withings valide.
- **Une fois par jour** (à minuit) : ré-import des **7 derniers jours** pour rattraper toute pesée manquée (panne réseau, balance hors-ligne...), sans doublon : une valeur par

jour, la dernière pesée du jour, notée à midi.

- **En temps réel (mode push)** : Withings prévient Jeedom dès qu'une nouvelle donnée arrive, pour une mise à jour immédiate.
-

7. Points d'attention

- **Composition corporelle avant le 1er avril 2026 laissée telle quelle.** Le contrôle de cohérence ci-dessous ne s'applique qu'aux mesures prises depuis cette date : les valeurs plus anciennes sont gardées telles que Withings les fournit, sans correction. Aucune donnée n'est masquée ni supprimée.
 - **Contrôle de cohérence automatique** : à chaque synchronisation des 30 minutes et à chaque import, le plugin corrige dans l'historique les incohérences simples du jour (masse maigre = poids – masse grasse, pourcentage de masse grasse = masse grasse / poids ; la valeur affichée reste celle de Withings) et **signale** dans le journal **_Timeline** les valeurs physiologiquement impossibles (masse musculaire ou hydratation supérieure à la masse maigre, masse osseuse hors 2 à 6 kg), sans les modifier.
 - **Journal du plugin** : un incident qui se règle seul (Withings injoignable un moment, jeton à renouveler) n'y laisse qu'une information ; un avertissement n'apparaît que si vous devez agir : Withings injoignable depuis plus de 3 heures, ou autorisation refusée 3 fois (reliez de nouveau l'utilisateur).
 - **Accès externe nécessaire** : l'autorisation OAuth et le mode push exigent un Jeedom joignable depuis Internet.
-

8. Questions fréquentes

Mes pesées ne remontent plus. Ouvrez la page **Santé** (chapitre 4) et vérifiez l'état du lien et du mode push de l'utilisateur concerné. Si le lien n'est pas au vert, relancez l'autorisation depuis l'équipement utilisateur.

Comment récupérer tout mon historique ? Sur l'équipement utilisateur, lancez l'action **Importer historique complet** (une valeur par jour, sans effacer l'existant).

Le panneau met longtemps à s'afficher. Réduisez la plage de dates (boutons **M** ou **3M**) ou utilisez une **agrégation** (moyenne par jour / semaine) pour alléger le calcul sur les longues périodes.

Ma composition corporelle paraît incohérente sur une période ancienne. Avant le 1er avril 2026, le plugin ne corrige pas la composition : les valeurs sont celles de la balance. Le poids, lui, n'est jamais modifié.